

病理組織固定用


# 10%中性緩衝ホルマリン液 〈暴露防止タイプ〉

“毎日つかうものだから”  
安心安全に取り扱える製品を

## 特長

- ・キャップに緩衝ホルマリン液がはいつています。
- ・検体を容器に入れキャップを閉めると容器に緩衝ホルマリン液が流れ出ます。
- ・暴露しない構造になっており安心してお使いいただけます。

## 容量

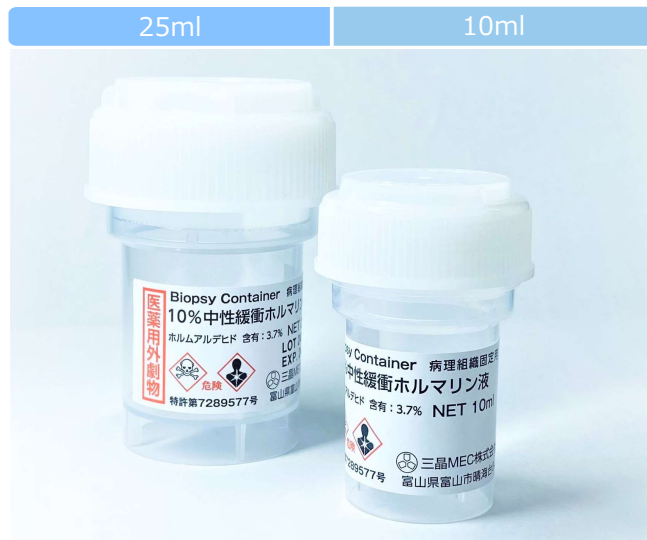

医薬用外劇物  
ホルムアルデヒド含有：3.7%

## 取扱手順

1.キャップを開けます



3.キャップを締め切ります



2.検体を容器に入れます



4.緩衝ホルマリン液が容器に流れ込みます



弊社は『モノヅクリ』企業としての視点から、  
医療に携わる方々のお役に立てる製品を開発しています。



三晶MEC株式会社

〒931-8455

富山県富山市晴海台8-5

TEL：076-471-5432 FAX：076-471-5433

E-mail：medical@sansho-mec.co.jp

webサイト：https://www.sansho-mec.co.jp

令和5年6月に日本国内特許を取得しました  
特許番号：特許第7289577号